


## Tri Auto mini

El nuevo motor endodóntico compacto.

### Un vistazo a las ventajas del Tri Auto mini.

- Funciones nuevas e innovadoras.
- Batería de operaciones recargable y libre de cables.
- Rango de velocidad flexible desde 50 hasta 1,000 rpm.
- 6 localizaciones de almacenamiento para los parámetros de tratamientos.
- Expandible modularmente con el Root Zx mini.
- Compatible con todas las limas NiTi estándar.

Thinking ahead. Focused on life.

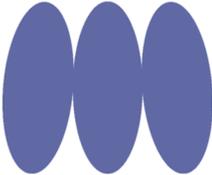

**MORITA**

# Tri Auto mini – Funciones convincentes

El alto rendimiento del motor endodóntico Tri Auto mini sobresale por sus extremadamente elevados niveles de flexibilidad. Con sus dimensiones compactas y su bajo peso, encaja perfectamente en la mano y abre una nueva dimensión de libertad en las posibilidades del tratamiento gracias a su batería para operaciones recargable. El usuario puede ajustar la velocidad del giro del filo corte, los valores de torque y varias funciones de seguridad con el toque de un botón y de este modo incrementar la seguridad de los pacientes.

Las diversas combinaciones de parámetros para indicaciones individuales pueden guardarse para un manejo incluso más fácil. En combinación con el localizador del vértice de ápice Root ZX mini, usted tendrá un instrumento endométrico y de tratamiento de la más alta calidad.



La pantalla LC muestra la selección de color.



Distribución específica de la configuración de la pantalla para zurdos.

## Seguridad

- Funciones innovadoras
  - Auto reversión del torque.
  - Freno automático del torque: Reducción de la velocidad de rotación cuando se aproxima a la limitación del torque.
- Indicativo visual de la posición del corte en la pantalla\*
- Cambio en los colores en la pantalla cuando se aproxima al ápice\*

\*) En combinación con el Root ZX mini

## Sistema modular

- Actualización con el localizador del ápice Root ZX mini para
- transferencia de datos por cable. Funciones adicionales para una preparación óptima.
  - Length Measurement
  - Auto Apical Stop
  - Auto Apical Reverse
  - Auto Start / Stop
  - Auto Apical Slow Down

## Tri Auto mini – Información técnica

### Pieza de mano

Pantalla: LCD  
 Peso: 78 g  
 Motor: 50 – 1,000 rpm  
 Torque: 3.9 Ncm  
 Batería (recargable): 3.7 V lithium-ion  
 Diámetro: 28 mm / Alto: 150 mm

## Flexibilidad

- Tri Auto mini es compatible con todos los archivos estándar NiTi.
- Pieza de mano rotacional (250°) para una visibilidad óptima en todos los cuadrantes.
- Rango de velocidad desde 50 hasta 1,000 rpm.
- Utilizable tanto por diestros como por zurdos.
- Batería-operativa (recargable) y sin cables.

## Tratamiento confortable

- Angulo de la pieza fácil de manejar con una cabeza extremadamente pequeña (9mm) para un elevado confort del paciente.
- Pantalla clara de LC con colores que ahorra energía.
- Tonos de señal seleccionables.
- Capacidad de variar las velocidades del corte.
- Valores variables del torque.
- 6 localizaciones de almacenamiento para los parámetros de tratamientos.



Distribuido por  
 J. Morita Europe GmbH  
 Justus-von-Liebig-Str. 27a, 63128 Dietzenbach, Deutschland  
 Tel.: +49 (0)60 74 / 836 - 0, Fax: +49 (0)60 74 / 836 - 299  
 www.JMoritaEurope.com

Fabricado por  
 J. Morita Mfg. Corp.  
 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612 - 8533 Japan  
 Tel.: +81 (0)75 / 611 - 2141, Fax: +81 (0)75 / 622 - 4595  
 www.JMorita.com

